



Сделайте доступ к первой помощи быстрым, простым и эффективным

plum



Первая помощь должна быть всегда под рукой

Каждый день люди получают травмы – тяжелые или легкие. С этим ничего не поделаешь. Это жестокая действительность. Поэтому, если случилась беда, первая помощь должна быть всегда под рукой.

Мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор средств первой помощи, которые помогут вам быстро и гигиенично обработать порезы и раны, а также оказать помощь при травмах глаз.



Исходите из своих потребностей

В ассортимент наших средств первой помощи входят лейкопластыри, влажные салфетки для очистки ран и широкий спектр устройств для промывания глаз. Вы можете сочетать эти изделия по своему усмотрению. Главное, чтобы они отвечали потребностям каждого рабочего места.

Быстрая помощь ценна вдвойне

Если произошел несчастный случай, от быстроты первой помощи будет зависеть, насколько серьезными окажутся его последствия. Особенно, когда речь идет о травмах глаз. Но и при микротравмах – порезах и ссадинах – быстрота первой помощи очень важна. Чем быстрее помощь, тем меньше неприятных ощущений. И вы снова готовы к работе.

Доступность – ключ к успеху

Помните – средства первой помощи должны быть всегда под рукой! Ни в дальнем углу шкафа, ни в нижнем ящике стола или еще где-то, где до них не добраться без труда. Поэтому все наши средства первой помощи сделаны так, что их можно установить на видном и легкодоступном месте. Причем речь идет как об отдельных изделиях, так и о комплекте средств первой помощи. Об этом вы сможете подробнее узнать на страницах нашего проспекта. Постарайтесь прочитать его до того, как произойдет следующий несчастный случай!



У вас только два глаза – берегите их!

Промыть глаза очень просто!



Извлеките флакон из держателя.



Поверните колпачок до нарушения герметичности флакона.



Запрокиньте голову и начинайте промывание.



Если не хотите замочить одежду, можно промывать глаз, наклонив голову вниз.

Внимание: при любых травмах жидкость должна попадать в поврежденный глаз равномерно и без напора. Слегка нажимайте на флакон, не сдавливая его. Обязательно обратитесь к врачу. Продолжайте промывание вплоть до приема у врача.

Насадка флакона повторяет форму углубления вокруг глаза. Процесс промывания проходит удобно, гигиенично и просто.



Зрение является одним из самых важных чувств

Зрение важно в любых жизненных и трудовых ситуациях. Так что, берегите глаза! Осторожность и здравый смысл помогут вам в большинстве ситуаций, но, к сожалению, никто не может обезопасить себя от несчастного случая. Зато все могут быть к нему подготовлены. Обеспечив себя нашими средствами для промывания глаз, вы будете знать, что сделали все от вас зависящее.

Решающее мгновение

Если произошел несчастный случай, всего несколько секунд могут решить судьбу вашего зрения. Поэтому быстрый доступ к средствам первой помощи на тех рабочих местах, где есть риск травмы глаз, имеет огромное значение.

Эффективные средства

Жидкость для промывания глаз Plum идеальна для того, чтобы избавиться от инородных частиц, попавших в глаза. А раствор pH Neutral используется для нейтрализации кислот и щелочей.

Гибкая система

Благодаря широкой программе продукции вы можете подобрать наиболее оптимальное решение лучшим образом отвечающее вашим потребностям. Большие и малые стационарные комплекты для установки на стене в непосредственной близости от рабочего места. Есть также мобильные решения для автотранспорта и переносные емкости для аптечки первой помощи или специальной поясной сумки, которую можно всегда носить с собой.

Большой срок хранения

При сохранении герметичности флакона стерильная жидкость для промывания глаз имеет срок хранения 3 года. Дата истечения срока годности четко обозначена на этикетке.

Простое и быстрое применение

Система была разработана так, что промывание глаза можно начать за считанные секунды после несчастного случая. Два простых движения – и флакон готов к использованию. Простая инструкция по применению, снабженная пиктограммами на флаконах и настенных держателях поможет пострадавшему действовать правильно.

Высокая функциональная надежность

Эргономичный дизайн наконечников флаконов обеспечивает простоту промывания, при котором максимальное количество жидкости достигает цели, попадая прямо в пораженный глаз. Одновременно с этим использованная жидкость отводится от глаза. Флаконы имеют маркировку CE в соответствии с требованиями законодательства для изделий медицинского назначения.

Раствор pH Neutral для нейтрализации кислот и щелочей. Документально доказанная надежность и эффективность

Кислоты и щелочи могут попасть в глаз в твердом, жидком или газообразном виде. Взорвавшийся автомобильный аккумулятор может привести к тяжелым последствиям для глаз. Еще большую опасность представляют всего несколько капель концентрированной щелочи, которые за очень короткое время могут нанести непоправимый вред роговой оболочке глаза.

Следующие факторы влияют на серьезность травмы при попадании едких веществ:

- Концентрация химиката. Концентрированные кислоты и щелочи крайне опасны.
- Температура. Высокая температура усиливает поражающие свойства химикатов.
- Время воздействия. Чем больше время контакта, тем глубже химикат проникает в ткань глаза, а значит, тем выше риск серьезного поражения.

Несколько секунд решают все

При попадании в глаз кислоты или щелочи необходимо как можно быстрее нейтрализовать действие химиката, то есть вернуть показатель pH на уровень 7,4 – естественный уровень pH жидкой среды глаза. Наилучший эффект нейтрализации достигается до того, как едкое вещество успеет проникнуть сквозь роговицу глаза. Время нейтрализации зависит от степени концентрации химиката. Для оптимизации безопасности тех производственных участков, где существует риск кислотных и щелочных травм глаз, необходимо, чтобы средства для промывания были:

- Легкодоступны
- Просты в обращении
- Эффективны

Средство первой помощи должно быть эффективным

pH Neutral – это 4,9% буферный раствор фосфатных солей, который быстро и эффективно нейтрализует даже высококонцентрированные кислоты и щелочи. Фосфатные соли, из которых состоит раствор, имеются в человеческом организме. Одна составляющая буферной системы – гидрофосфат – эффективно действует против кислот, а другая – дигидрофосфат – реагирует на щелочи. При использовании обычной воды или 0,9% раствора хлористого натрия достигается всего лишь разбавление химиката. А это означает, что необходимы значительно большее количество жидкости и, одновременно, более продолжительное время промывания.

Используя метод титриметрического лабораторного анализа, мы испытали эффективность нейтрализующего действия раствора pH Neutral в отношении сильных кислот и щелочей в сравнении с эффектом обычного 0,9% раствора хлористого натрия для промывания глаз. Результаты опыта однозначно демонстрируют, что pH Neutral нейтрализует и кислоты, и щелочи, доводя показатели pH до безопасного уровня. Обычная жидкость для промывания глаз разбавляет концентрацию химикатов, лишь незначительно изменяя значение pH (Рис. 1).

Действенность раствора pH Neutral документирована в ряде научных работ.^{1 2}

Рекомендации по применению pH Neutral

При попадании в глаза кислот и щелочей рекомендуется использование емкости с буферным раствором, которого хватает на 2 минуты промывания. Целью промывания является скорейшая нормализация показателя pH. Мы также рекомендуем продолжать промывание глаза 0,9% раствором хлорида натрия во время транспортировки пострадавшего к врачу.

Исследования, проведенные независимыми экспертами, показывают, что рекомендованное 2-х минутное промывание глаза раствором pH Neutral является безопасным для глаза.^{3 4}

1) Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2) Professor Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005

3) Corydon L, Høgsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Clinical Trial of Eye Irrigation with Buffer Solution. Clinical investigation report. Vejle Sygehus, 2003.


4) Damgaard AL, Hovendal MP, Scroder MP, Saxtorph H, Bollen P. First aid treatment of alkali eye burns with phosphate buffer does not cause corneal calcifications. Poster, EAPCCT XXIX International Congress in Stockholm, 2009.

Всю документацию можно получить по запросу.



При несчастных случаях, связанных с кислотами и щелочами, от быстроты и эффективности вмешательства зависит степень поражения глаза. Травмы, вызванные едкими веществами, всегда имеют серьезные последствия, так как поражение тканей глаза начинается мгновенно.

Рис. 1: Нейтрализующий эффект раствора pH Neutral и 0,9% раствора хлористого натрия*

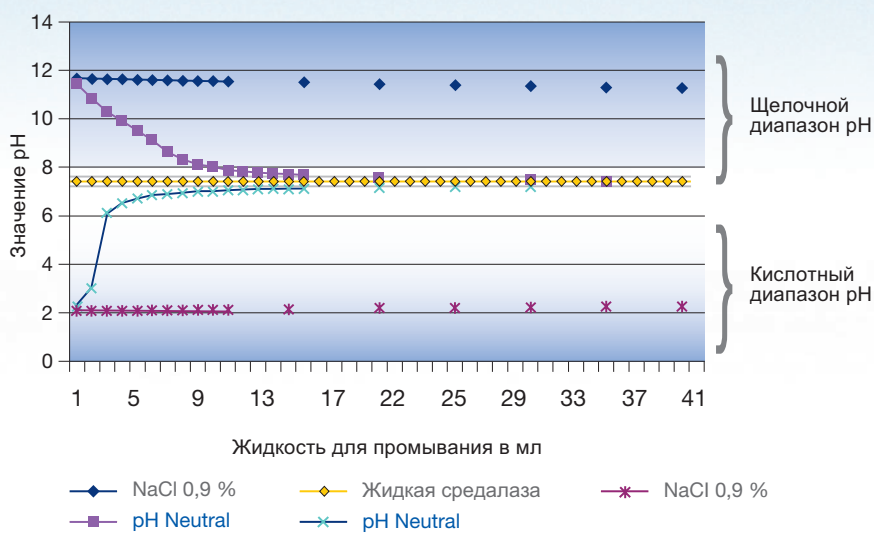

*Титриметрический анализ произведен (in vitro) в лаборатории Plum A/S. В ходе теста в жидкость pH Neutral и 0,9% раствор хлористого натрия был постепенно добавлен раствор, содержащий одну каплю серной кислоты + 40 мл воды, а также раствор, содержащий одну каплю едкого калия + 40 мл воды. Затем были произведены замеры значений pH и количества жидкости для промывания глаз.

Раствор pH Neutral может с таким же эффектом использоваться для нейтрализации кислот и щелочей, попавших на незащищенные участки тела.

С учетом ваших потребностей

Раствор pH Neutral поставляется в небольшом удобном флаконе емкостью 200 мл, который можно разместить рядом с рабочим местом, в ящике с инструментами или аптечке первой помощи. Кроме того, pH Neutral поставляется в 500 мл флаконе со специальным устройством, позволяющим производить промывание двух глаз одновременно. Обе емкости рассчитаны на промывание глаз в течение двух минут. Жидкости во флаконе хватает на 2 минуты промывания.

Несколько простых движений - и можно начинать промывание

- Поверните колпачок по стрелке до нарушения герметичности флакона.
- Запрокиньте голову и начинайте промывание.






У нас два глаза. Теперь вы сможете промывать оба глаза одновременно с помощью Duo

Часто при несчастных случаях страдают оба глаза. До последнего времени не существовало мобильного устройства, с помощью которого можно было бы промывать оба глаза одновременно. Это означало, что при серьезных несчастных случаях пострадавший был вынужден принимать нелегкое решение о том, какой из двух глаз спасать.

Больше в этом нет необходимости. Теперь есть Plum Duo, который во многих случаях является необходимым дополнением к обычным системам для промывания глаз. Устройством Plum Duo оснащены как флаконы с раствором pH Neutral, так и с 0,9% раствором хлористого натрия.

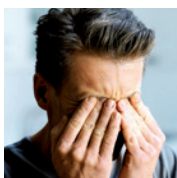

Если в оба глаза попала кислота или другое опасное вещество, каждая секунда может стоить дорого.



С помощью Duo вы можете промыть оба глаза одновременно. Равномерная струйка жидкости удаляет химикат из глаза.



Дизайн колпачка помогает зафиксировать веки в раскрытом положении.

Так предупреждаются глазные травмы

Когда произошел несчастный случай, очень важно быстро и эффективно промыть глаз, чтобы предотвратить или минимизировать травму. Широта нашего ассортимента средств для промывания глаз позволяет выбрать такое решение, которое отвечает потребностям вашего рабочего места. В приведенном ниже плане по оказанию первой помощи вы можете получить рекомендации по промыванию глаз при разных типах глазных травм.



План оказания первой помощи при травмах глаз

ХАРАКТЕР ТРАВМЫ	СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ	ДАЛЕЙШЕЕ ПРОМЫВАНИЕ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫВАНИЯ
Инородные тела Пыль, грязь, металлическая и древесная стружка и пр.	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Промывать вплоть до удаления инородного тела.
Кислоты	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать pH Neutral до опустошения флакона, а затем раствором 0,9% NaCl вплоть до посещения врача.
Щелочи	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать pH Neutral до опустошения флакона, а затем раствором 0,9% NaCl вплоть до посещения врача.
Другие химикаты (напр., растворители и масла)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Промывать до преодоления дискомфорта и продолжать до посещения врача.

Внимание! При любых типах травм жидкость для промывания должна попадать в глаз равномерной стружкой без напора. Слегка нажимайте на флакон, не сдавливая его. Помощь врача обязательна. Продолжайте промывать глаз вплоть до приема у врача.

Химические травмы

Когда в глаз попадают кислоты или щелочи, разъедание глазной ткани начинается в момент контакта химиката с глазом. В этих случаях мы рекомендуем использовать pH Neutral с последующим промыванием раствором Plum 0,9% NaCl.

Механические травмы

Фактор времени имеет также большое значение при механических травмах, вызванных попаданием в глаза металлической и древесной стружки, пыли грязи и т.п. В таких случаях немедленное промывание предотвратит глубокое

проникновение инородных тел в ткань глаза и поможет избежать серьезных последствий. В подобной ситуации стерильный раствор Plum 0,9% NaCl является оптимальным выбором.

Составьте свою комбинацию

В нашем ассортименте есть устройства для промывания глаз, рассчитанные на различные типы травм и разные условия производства. Вы сами можете подобрать нужные изделия, отвечающие потребностям вашего рабочего места.

Первая помощь при попадании в глаза инородных частиц

Ниже приведены оптимальные решения для оказания первой помощи при попадании в глаза инородных частиц.

Флакон Plum Eye Wash 200 мл



Маленький удобный флакон содержит стерильный раствор хлористого натрия 0,9%. Флакон легко носить в специальном пояском футляре, аптечке первой помощи, ящичке для инструментов и т.п.

Время промывания:
примерно 2 мин.
Артикул: 4691
Упаковка: 10 x 200 мл

Флакон Plum Eye Wash 500 мл



Флакон содержит стерильный раствор хлористого натрия 0,9%. Может использоваться отдельно или для пополнения стационарных комплектов первой помощи.

Время промывания:
примерно 5 мин.
Артикул: 4604
Упаковка: 12 x 500 мл

Флакон Plum Eye Wash 1.000 мл



Флакон со стерильным раствором NaCl концентрацией 0,9%. Содержит 1000 мл жидкости для промывания глаз для длительного очищающего действия. Может использоваться отдельно или для пополнения стационарных комплектов. В комплект входит пылезащитный колпачок.

Время промывания:
примерно 10 мин.
Артикул: 4707
Упаковка: 6 x 1000 мл

Флакон Plum Eye Wash Duo 1000 мл



Емкость содержит стерильный раствор хлористого натрия 0,9%. Имеет специальную насадку Duo, позволяющую производить промывание двух глаз одновременно. Может использоваться отдельно или для пополнения стационарных комплектов первой помощи.

Время промывания:
примерно 5 мин.
Артикул: 4800
Упаковка: 6 x 1000 мл

Комплект Plum Eye Wash



Настенный комплект состоит из одной емкости с раствором NaCl 0,9% и пиктограммы. Комплект предназначен для участков, где может потребоваться незамедлительное промывание глаз, для малых предприятий и мобильных рабочих мест.

Время промывания:
примерно 5 мин.
Артикул: 4611
Упаковка: 1 шт.

Комплект Plum Eye Wash Duo



Настенный комплект состоит из одной емкости Duo с раствором NaCl 0,9% 1000 мл, держателя, пиктограммы и зеркала. Предназначен для малых предприятий и мобильных рабочих мест, где велика вероятность травмирования двух глаз одновременно.

Время промывания:
примерно 5 мин.
Артикул: 4802
Упаковка: 1 шт.

Комплект Plum Eye Wash



Удобное решение для оказания первой помощи при травмах глаза. Комплект легко установить рядом с рабочим местом. В комплект входит зеркало и четкая инструкция по применению, что обеспечивает правильное использование средства при несчастном случае. Комплект не подходит для установки в сильно запыленных местах.

Время промывания:
примерно 10 мин.
Артикул: 4694
Упаковка: 1 шт.

Комплект Plum Eye Wash Maxi



Комплект для настенного крепления с двумя флаконами по 1000 мл Plum Eye Wash. Предназначен для участков, где может потребоваться длительное промывание глаз. В комплект входит пылезащитный колпачок.

Время промывания:
примерно 20 мин.
Артикул: 4708
Упаковка: 1 шт.

Закрытый Комплект Plum Eye Wash



Пылезащитный контейнер для настенного крепления из ударопрочного пенополистирола с двумя флаконами раствора NaCl 0,9% по 500 мл. Комплект предназначен для участков с высокой запыленностью и мобильных рабочих мест. В комплект входит пиктограмма, расположенная на внешней стороне крышки, и зеркало – на внутренней. Контейнер может поставляться с нагревательным элементом. Артикул: 4649

Время промывания:
примерно 10 мин.
Артикул: 4650
Упаковка: 1 шт.

Закрытый комплект Plum Eye Wash Duo



Пылезащитный комплект с двумя флаконами 1000 мл Plum Eye Wash Duo, пиктограммой на внешней стороне крышки и зеркалом – на внутренней. Комплект предназначен для установки на участках с высокой запыленностью и для мобильных рабочих мест.

Время промывания:
Plum Eye Wash
примерно 10 мин.
Артикул: 4816
Упаковка: 1 шт.

Все флаконы имеют маркировку CE и срок хранения 3 года.

Первая помощь при попадании в глаза кислот и щелочей

При поражении глаз кислотами и щелочами мы рекомендуем использовать следующие средства первой помощи.

<p>Флакон pH Neutral 200 мл</p>  <p>Маленький удобный флакон со стерильным буферным раствором фосфатных солей концентрацией 4,9%. Мгновенно нейтрализует кислоты и щелочи. Флакон легко носить в специальном пояском футляре, аптечке первой помощи, ящике для инструментов и т.п. Может использоваться отдельно или для пополнения стационарных комплектов первой помощи.</p> <p>Время промывания: примерно 2 мин. Артикул: 4752 Упаковка: 10 x 200 мл</p>	<p>Флакон pH Neutral Duo 500 мл</p>  <p>Флакон со стерильным буферным раствором фосфатных солей концентрацией 4,9%. Мгновенно нейтрализует кислоты и щелочи. Имеет специальную насадку Duo, позволяющую производить промывание двух глаз одновременно. Может использоваться отдельно или для пополнения стационарных комплектов первой помощи.</p> <p>Время промывания: примерно 2 мин. Артикул: 4801 Упаковка: 6 x 500 мл</p>	<p>Флакон pH Neutral 1.000 мл</p>  <p>1.000 мл емкость со стерильным буферным раствором фосфатных солей концентрацией 4,9 %, который быстро и эффективно нейтрализует даже высококонцентрированные кислоты и щелочи. Флакон снабжен специальной душевой насадкой, которая позволяет быстро распределять жидкость на значительных участках тела. Флакон можно расположить на рабочем столе, носить в ящике для инструментов, возить в автомобиле.</p> <p>Время промывания: примерно 2 мин. Артикул: 4746 Упаковка: 6 x 1.000 мл</p>
<p>Комплект pH Neutral Maxi</p>  <p>Флакон 1.000 мл pH Neutral, настенный держатель и инструкция по применению. Может устанавливаться рядом с рабочим местом, не зависит от водопровода. Прекрасное дополнение к стационарному аварийному душу. Оптимальное средство первой помощи на месте несчастного случая</p> <p>Время промывания: примерно 2 мин. Артикул: 4741 Упаковка: 1 шт.</p>	<p>Комбинированный комплект Plum</p>  <p>Комплект для настенного крепления с 200 мл флаконом pH Neutral и 500 мл флаконом Plum Eye Wash. Комплект предназначен для установки на участках, где существует опасность поражения глаз инородными телами, кислотами и щелочами.</p> <p>Время промывания: pH Neutral примерно 2 мин. / Plum Eye Wash примерно 5 мин. Артикул: 4773 Упаковка: 1 шт.</p>	<p>Комбинированный комплект Plum Duo</p>  <p>В комплект для настенного крепления входит 500 мл емкость pH Neutral Duo, 1000 мл емкость Plum Eye Wash Duo, крепления для емкостей, пиктограмма с инструкцией и зеркало. Комплект предназначен для установки на участках, где существует опасность одновременного поражения двух глаз, как инородными телами, так и химикатами.</p> <p>Время промывания: pH Neutral примерно 2 мин. / Plum Eye Wash примерно 5 мин. Артикул: 4803 Упаковка: 1 шт.</p>
<p>Закрытый комбинированный комплект Plum Duo</p>  <p>Пылезащищенный контейнер для настенного крепления из ударопрочного пенополистирола с флаконом pH Neutral Duo 500 мл и емкостью NaCl 0,9% Duo 1000 мл. Комплект предназначен для установки на производственных участках с высокой запыленностью и риском одновременного поражения двух глаз, как инородными частицами, так и химикатами. В комплект входит пиктограмма с инструкцией, расположенная на внешней стороне крышки, и зеркало – на внутренней.</p> <p>Время промывания: pH Neutral примерно 2 мин. / Plum Eye Wash примерно 5 мин. Артикул: 4810 Упаковка: 1 шт.</p>	<p>Закрытый комбинированный комплект Plum</p>  <p>Пылезащищенный контейнер для настенного крепления из ударопрочного пенополистирола с флаконом pH Neutral 200 мл и Plum Eye Wash 500 мл. Комплект предназначен для установки на производственных участках с высокой запыленностью и риском поражения, как инородными частицами, так и химикатами. В комплект входит пиктограмма, расположенная на внешней стороне крышки, и зеркало – на внутренней.</p> <p>Время промывания: pH Neutral примерно 2 мин. / Plum Eye Wash примерно 5 мин. Артикул: 4787 Упаковка: 1 шт.</p>	<p>Поясной футляр для флаконов 200 мл</p>  <p>Практичный футляр, который может крепиться на пояском ремне, рабочей одежде и т.д. Легко открывается и обеспечивает безопасное и гигиеничное хранение флакона.</p> <p>Артикул: 4692 Упаковка: 10 шт.</p>

Не тратьте время на мелкие неприятности

Quick Fix



Аптечка первой помощи - вещь необходимая при серьезных проблемах. Но каждый день на предприятиях страны множество людей получают травмы. В абсолютном большинстве случаев для ликвидации их последствий достаточно простого лейкопластыря. Заклеил порез, и продолжай работу. Диспенсер пластыря QuickFix может навести порядок в оказании первой помощи при микротравмах и не тратить на это больше времени, чем необходимо. Эта система гигиенична, проста и всегда готова к использованию. Быстро наклеил пластырь - и за работу.

Уникальный диспенсер - главный элемент системы:

- Обеспечивает удобный доступ к пластырю
- Быстро, просто и гигиенично решает большинство проблем
- Пластырь достается одной рукой
- Может заполняться разными типами пластырей по потребности
- Сразу видно, когда пластырь заканчивается
- Легко остановить кровь, не оставляя пятен на других пластырях
- Благодаря компактности легко найти место для установки
- Имеет внутреннюю полочку для полезных мелочей
- Каждый пластырь индивидуально упакован
- Диспенсер может запирается на замок.

QuickFix Водостойкий



Диспенсер QuickFix в комплекте с двумя сменными кассетами водостойкого пластыря
Артикул 5501
Упаковка: 1 шт.

Сменная кассета, содержащая 45 водостойких пластырей QuickFix
Артикул 5511
Упаковка: 6 x 45 шт.

Водостойкий пластырь предназначен для применения в условиях повышенной влажности.

QuickFix Эластичный



Диспенсер QuickFix в комплекте с двумя сменными кассетами эластичного пластыря
Артикул 5502
Упаковка: 1 шт.

Сменная кассета, содержащая 45 эластичных пластырей QuickFix
Артикул 5512
Упаковка: 6 x 45 шт.

QuickFix Детектируемый



Диспенсер QuickFix в комплекте с двумя сменными кассетами детектируемого пластыря
Артикул 5503
Упаковка: 1 шт.

Сменная кассета, содержащая 45 детектируемых пластырей QuickFix
Артикул 5513
Упаковка: 6 x 45 шт.

Пластырь броского ярко-синего цвета со встроенным металлическим элементом, который легко обнаруживается металлодетектором.

Эластичный и Водостойкий



Диспенсер QuickFix в комплекте с одной сменной кассетой эластичного пластыря и одной сменной кассетой водостойкого пластыря. Артикул 5507.
Упаковка: 1 шт.

Сочетание водостойкого и эластичного пластыря отвечает большинству потребностей любого рабочего места, так как позволяет использовать специальный пластырь для влажных условий и обычный наиболее удобный пластырь для нормальных условий.

Диспенсер пластырей QuickFix имеет всего 23 см в ширину и 13,5 см в высоту. Несмотря на скромные габариты в нем помещаются 90 пластырей. Стало быть, для него всегда можно найти место там, где он больше всего нужен.

QuickFix Длинный



Обладает следующими преимуществами:

- Обеспечивает оптимальную защиту ран и царапин
- Можно несколько раз обернуть вокруг пальца
- Прочнее наклеивается и дольше держится на пальце
- Обеспечивает высокую степень комфорта благодаря эластичным и дышащим материалам
- Обеспечивает высокие гигиенические стандарты – каждый пластырь отдельно запечатан
- Может комбинироваться с другими пластырями QuickFix в диспенсере QuickFix.

Быстро за работу



Извлеките пластырь из диспенсера.



Пластырь сразу готов к употреблению.



Пластырь можно наклеить одной рукой.

Эластичный Длинный



Диспенсер QuickFix
Содержит 60 длинных
пластырей
Артикул 5528
Упаковка: 1 шт.

Сменная кассета QuickFix
Длинный
Содержит 30 шт. эластичных
пластырей
Артикул 5508
Упаковка: 6 x 30 шт.

Длинные эластичные текстильные пластыри обеспечивают высокую степень комфорта при использовании. Дает возможность несколько раз обернуть вокруг пальца и тем самым лучше держится. Хорошо держатся даже при сильном воздействии.

Детектируемый Длинный



Диспенсер QuickFix
Содержит 60 длинных
пластырей
Артикул 5529
Упаковка: 1 шт.

Сменная кассета QuickFix Длинный
Содержит 30 шт. эластичных
детектируемых
пластырей
Артикул 5509
Упаковка: 6 x 30 шт.

Броские голубые длинные пластыри со встроенным металлическим элементом, обнаруживаются металлодетектором. Эластичный текстильный пластырь обеспечивает высокую степень комфорта при использовании. Дает возможность несколько раз обернуть вокруг пальца и тем самым лучше держится. Хорошо держатся даже при сильном воздействии. Специально предназначен для использования в сферах с высокими гигиеническими стандартами (в пищевой промышленности, столовых и т.д.).

Всегда под рукой

Новый комплект QuickFix Mini избавит вас от излишних хлопот и траты времени на поиски пластыря. Маленькая практичная упаковка будет у вас всегда под рукой. Ее можно носить в кармане, сумке, ящике с инструментами, аптечке, брать с собой в машину. Вы всегда будете готовы к маленьким «сюрпризам», которые может преподнести жизнь. В комплект QuickFix Mini входит 30 эластичных пластырей.

Артикул 5504

Упаковка: 30 x 30 шт.



Пусть поработает QuickClean

Прежде чем наклеить пластырь даже на самую маленькую ранку, ее необходимо очистить.

Если в нее попала грязь, она будет долго заживать. Благодаря QuickClean у вас всегда под рукой будет влажная очищающая салфетка.



Просто и быстро



Извлеките салфетку из раздатчика.



Надрвите упаковку. Салфетка готова к использованию.



Очистите рану. Быстро и эффективно.

Салфетки QuickClean с настенным держателем



Артикул: 5550
Упаковка: 6 x 40 шт.

В настенном раздатчике для установки в непосредственной близости от рабочего места имеется 40 очищающих салфеток. Каждая салфетка индивидуально упакована и содержит стерильную воду.

Размеры салфетки: 130 x 200 мм.

Салфетки имеют маркировку CE.

Очищающие салфетки



Артикул: 5551
Упаковка: 11 x 40 шт.

Коробка с 40 очищающими салфетками. Каждая салфетка индивидуально упакована и содержит стерильную воду. Может использоваться самостоятельно или как сменный блок для настенного раздатчика.

Размеры салфетки: 130 x 200 мм.

Салфетки имеют маркировку CE.

Очистили рану, и снова за дело!


Мелких порезов и царапин не избежишь. Они естественным образом сопровождают любой ручной труд. Однако микротравмы могут иметь серьезные последствия, если начнется инфекция. Но ее можно предотвратить.

Инфекция обходится дорого

Результатом инфекции, занесенной даже в самую незначительную царапину, может стать воспаление, которое будет вызывать постоянную боль и мешать работать. Это слишком высокая плата за мелкую травму. Поэтому всегда старайтесь очищать любые порезы и царапины, какими бы незначительными они ни казались.

Доступность – главное в первой помощи

В конечном итоге правильная обработка раны зависит от доступности средств первой помощи. Когда нужно промыть рану, воды может поблизости не оказаться. Благодаря салфеткам QuickClean у вас есть возможность обработать порез или ссадину без промедления. Быстро и гигиенично. Настенный раздатчик можно установить прямо на рабочем месте, чтобы у вас и ваших коллег очищающие салфетки были всегда под рукой.

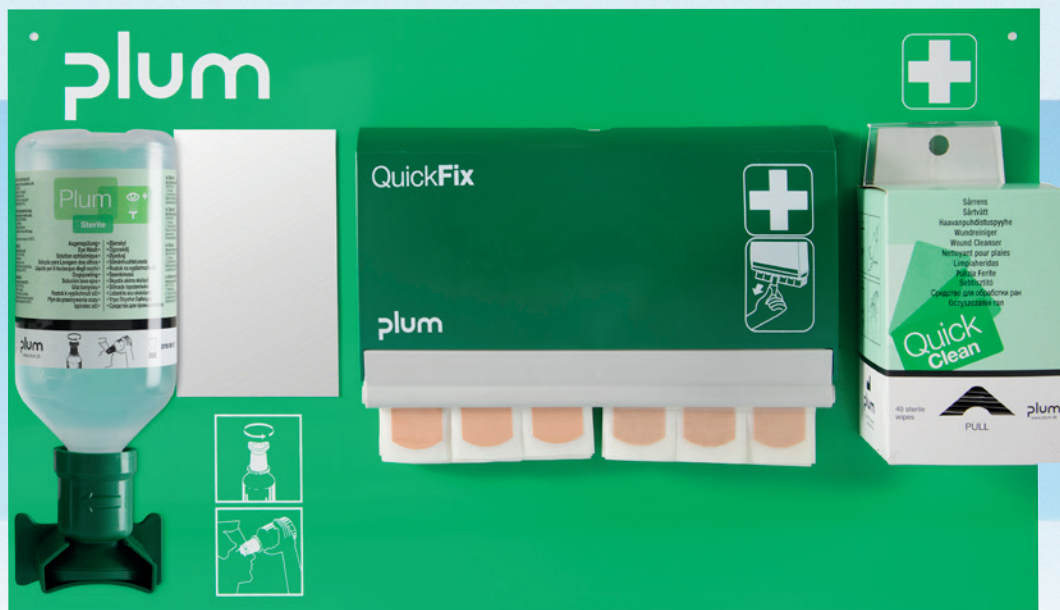

Удобный флакон с жидкостью для промывания глаз.

Зеркало, которое поможет выявить характер травмы и промыть глаз.

Раздатчик позволяет воспользоваться пластырем даже одной рукой

Очищающие салфетки важны для гигиены.

Размеры: 515 X 300 мм

Артикул 5102

Сократите путь к первой помощи

Системный подход к первой помощи

Мы собрали самые необходимые средства первой помощи в один комплект. Его можно установить на тех участках, где потребность в них наиболее высока.

Мы исходим из ваших потребностей

В комплект первой помощи входит 500 мл флакон с раствором для промывания глаз, раздатчик пластырей QuickFix с 45 эластичными и 45 водостойкими пластырями, а также 40 очищающих салфеток QuickClean. Один комплект позволит оказать первую помощь и при травмах глаз, а также мелких порезах и царапинах. Возможность оказания быстрой первой помощи повысит чувство уверенности и безопасности на рабочем месте.

Самое главное в первой помощи – это знать, где можно быстро ее получить.



Правильно подобранные средства первой помощи помогут обеспечить безопасность и чувство уверенности на вашем рабочем месте.

Узнайте больше на www.plum.eu

Plum A/S
Frederik Plums Vej 2 • DK-5610 Assens
Tel. +45 6471 2112 • Fax +45 6471 2125
info@plum.dk • www.plum.eu

plum